



TAKE HOME WHITENING KIT


MINT FLAVOR

Orbis WHITE Hemmablekning
mintsma

Orbis WHITE Hjemmeblegning
med mint

Orbis WHITE Kotivalkaisu
mintun makuinen

Orbis WHITE Hjemmebleking
mintsma

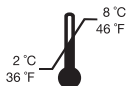

Distributed by Plandent Oy
Asentajankatu 6, 00880 Helsinki
Finland | www.plandent.com

Made in USA
1001190.01 120213



PRECAUTIONS

1. Do not use on patients with known sensitivities to peroxide products.
2. Not recommended for pregnant or lactating women.
3. Store bleaching gel out of heat/sunlight. Do not freeze. Store in refrigerator.
4. Dental fillings and crowns do not respond to tooth bleaching.
5. During whitening period: Acidic foods and juices may cause sensitivity. Avoid eating foods that may cause stains for example ketchup, curry, carrots etc.
6. Do not use tobacco products while bleaching.
7. Keep out of the reach of children.

BLEACHING OF TEETH

1. Brush teeth. Load ¼ syringe of gel inside the tray. Gel should be on front surface of teeth when tray is placed in mouth.
2. Place tray on arch and gently press to move gel over the front surface of teeth.
3. Remove excess gel with clean finger, tissue, or soft toothbrush. Gently rinse with water, but do not swallow.
4. When finished, clean teeth and tray with soft tooth brush and cool water. Do not swallow whitening gel. Save cleaned tray for next teeth whitening session.
5. Continue bleaching until wanted result has been achieved.
6. Temporary hypersensitivity can occur. Contact your dental professional for more info.

RECOMMENDED BLEACHING TIMES

Orbis WHITE Take home whitening gel 16% carbamide peroxide

Night bleaching: app. 7–8 hours every night depending on result for 3–8 days

Day bleaching: 2–4 hours depending on result for 3–8 days
16% carbamide peroxide gel will be inactive within 4–5 hours

Orbis WHITE take home whitening gel 6% hydrogen peroxide

Day bleaching: 30–60 min depending on result for 5–10 days

Not to be used on a person under 18 years of age. To be only sold to dental practitioners. For each cycle of use, the first use to be only done by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use.



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Bör inte användas på patienter med känd känslighet för produkter som innehåller peroxider.
2. Denna produkt bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor.
3. Förvara inte blekningsgelet i värme och/eller solljus. Förvaras i kylskåp.
4. Tandfyllningar och kronor reagerar inte på tandblekning, bleks ej.
5. Under blekningsperioden: Mat som innehåller syra, samt fruktjuicer kan orsaka tillfällig känslighet. Undvik att äta färgmättade produkter som t.ex ketchup, curry morot etc.
6. Användning av tobaksprodukter och intag av föda bör undvikas under blekningen.
7. Förvaras utom räckhåll för barn.

BLEKNING AV TÄNDER

1. Borsta tänderna. Ladda en fjärdedel av sprutans gel i plastskenan. Gelen skall hamna på tändernas främre yta då plastskenan placeras i munnen.
2. Placera plastskenan på tandbågen och tryck försiktigt för att fördela gelen på främre ytan av tänderna.
3. Avlägsna överflödigt gel med ett rent finger, en servett eller en mjuk tandborste. Skölj varsamt med vatten men svälj inte.
4. Rengör tänderna och plastskenan med en mjuk tandborste och kallt vatten då du är färdig. Svälj inte blekningsgelet. Spara plastskenan för följande tandblekningssession.
5. Försätt bleka tills önskat resultat uppnåtts
6. Tillfällig överkänslighet kan uppstå, kontakta din tandläkare för mer information

REKOMMENDERADE BLEKNINGSTIDER

Orbis WHITE Hemmablekning 16% karbamidperoxid gel
Nattblekning: ca 7–8 timmar varje natt i 3–8 dagar beroende på resultatet

Dagblekning: ca 2–4 timmar i 3–8 dagar beroende på resultatet
Gelens verkningskraft avtar efter 4–5 timmar

Orbis WHITE Hemmablekning 6% hydrogenperoxid gel
Dagblekning: 30–60 minuter dagligen i 5–10 dagar beroende på resultatet

Får inte användas till personer under 18 år. Får endast säljas till tandläkare. Första gången i varje behandlingsomgång får produkterna endast användas av tandläkare eller under direkt överinseende av dem om en likvärdig säkerhetsnivå kan garanteras. Får därefter ges till konsumenten för att denne ska avsluta behandlingsomgången.

DK

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Må ikke anvendes på patienter med kendt følsomhed overfor brintoverilteprodukter.
2. Anbefales ikke til gravide eller ammende kvinder.
3. Opbevares i køleskab.
4. Tandfyldninger og -kroner reagerer ikke på tandblegning.
5. Under blegeperioden: undgå syrlige føde- og drikkevarer. Undgå føde- og drikkevarer med farvestoffer, f.eks. ketchup, karry, gulerødder, rødbeder, rødvin og lign.
6. Undlad anvendelse af tobaksprodukter under blegningen.
7. Opbevares utilgængeligt for børn.

BLEGNING AF TÆNDERNE

1. Børst tænderne omhyggeligt. Tryk gelen ud i skinnen, svarende til højst et tændstikhoved ved hver tand, der skal bleges. Gelen lægges på de flader, der vender ud mod læbe eller kind, når skinnen sættes ind i munden.
2. Den fyldte skinne sættes i munden og trykkes forsigtigt på plads mod tænderne.
3. Fjern overskydende gel med en ren finger, papirserviet eller en blød tandbørste. Skyl forsigtigt med vand, men undlad at synke.
4. Efter blegning børstes tænderne og skinnen med en blød tandbørste og koldt vand. Blegningen må ikke indtages. Gem den rengjorte skinne i en æske til næste tandblegning.
5. Fortsæt med blegning til det ønskede resultat er opnået.
6. Forbigående øget følsomhed af tænderne kan forekomme. Kontakt eventuelt tandlægen.

ANBEFALET ANVENDELSE

Orbis WHITE Hjemmeblegning, 16% karbamidperoxid gel
Natblegning: ca. 7–8 timer hver nat i 3–8 dage.
Dagblegning: 2–4 timer i 3–8 dage.
Virkningen af blegningen aftager efter ca. 4–5 timer.

Orbis WHITE Hjemmeblegning, 6% hydrogenperoxid gel
30–60 min dagligt i 5–10 dage afhængig af resultat.
Koncentrationen af H₂O₂ til stede eller frigjort, angivet i %

Må ikke anvendes til personer under 18 år. Må kun sælges til tandlæger. For hver brugscyklus må produkterne den første gang kun anvendes af tandlæger eller under en tandlæges direkte opsyn, hvis det garanteres et tilsvarende sikkerhedsniveau. Bagefter stilles produktet til rådighed for forbruger i resten af brugscyklen.

FI

VAROTOIMIA

1. Ei saa käyttää potilaille, jotka ovat allergisia peroksidivalmisteille.
2. Valkaisua ei suositella raskaana oleville tai imettävälle naisille.
3. Suojaa valkaisugeeli kuumuudelta ja aurin-gonvalolta. Ei saa jäättyä. Säilytä jääkaapissa.
4. Hammaspaikat ja kruunut eivät valkaistu.
5. Valkaisujakson aikana happamat ruoat ja mehut voivat aiheuttaa hampaiden arkuutta. Vältä värjääviä ruoka-aineita, kuten ketsuppia, currya, punajuurta jne.
6. Älä käytä tupakkatuotteita tai syö valkaisun aikana.
7. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

HAMPAIDEN VALKAISU

1. Harjaa hampaat. Pursota neljäsosa ruiskun sisällöstä valkaisuusliikseen. Geelin pitää tulla hampaiden etupintoja vasten kun valkaisuusliikka viedään suuhun.
2. Aseta valkaisuusliikka hammaskaarta vasten ja paina sitä hieman, jotta geeli leviää hampaiden etupinnoille.
3. Poista liika geeli puhtaalla sormella, paperipyyhkeellä tai pehmeällä hammasharjalla. Huuhtelee geeli pois hellävaraisesti vedellä, mutta älä niele.
4. Käsittelyn loputtua puhdistaa hampaat ja valkaisuusliikka pehmeällä harjalla viileää vettä käyttäen. Älä niele valkaisugeeliä. Laita puhdistettu valkaisuusliikka talteen seuraavaa käsitteä varten.
5. Jatka valkaisua kunnes haluttu tulos on saavutettu.
6. Väliaikaista hampaiden vihlontaa voi esiintyä. Ota yhteys hammashoidon ammattilaiseen tarvittaessa.

SUOSITELTU KÄYTTÖAIKA

Orbis WHITE Take home whitening gel 16% karbamidperoksid
Öisin: n. 7–8 tuntia n. 3–8 päivää riippuen tuloksesta.
Päivisin: n. 2–4 tuntia n. 3–8 päivää riippuen tuloksesta.
16 % karbamidperoksidi inaktivoituu n. 4–5 tunnissa.

Orbis WHITE Take home whitening gel 6% vetyperoksidi
Päivisin: n. 30–60 min n. 5–10 päivää riippuen tuloksesta.

Ei saa käyttää alle 18-vuotiaille. Myydään ainoastaan hammaslääkäreille. Kunkin käyttöjakson yhteydessä tuotetta saavat ensimmäisellä kerralla käyttää vain hammaslääkärit tai käyttö voi tapahtua hammaslääkärin välittömässä valvonnassa, jos voidaan varmistaa vastaava turvallisuuden taso. Myöhemmin tuotetta saa antaa kuluttajalle käyttöjakson saattamiseksi päätökseen.

NO

FORHOLDSREGLER

1. Må ikke brukes på pasienter med kjent følsomhet/allergi mot peroksidprodukter.
2. Bør ikke anvendes av gravide og ammende.
3. Blegningen må ikke utsettes for varme og / eller direkte sollys. Gelen kan ikke fryses. Oppbevares i kjøleskap.
4. Tannfyllinger og kroner reagerer ikke på tannbleking.
5. I løpet av blekeperioden: Syrlige mat- og drikkevarer kan medføre sensibilitet. Unngå mat og drikkevarer med fargestoffer, f.eks. ketchup, karri, gulrøtter, rødvin etc.
6. Unngå anvendelse av tobaksprodukter under blekingen.
7. Oppbevares utilgjengelig for barn.

BLEKING AV TENNER

1. Børst tennene. Fyll skinnen med ¼ sprøyte med gel. Gelen skal legges på de flater som vender ut mot leppe eller kinn, når skinnen settes inn i munnen.
2. Plasser skinnen over tennene og trykk forsiktig slik at gelen fordeler seg jevnt over frontsidene av tennene.
3. Fjern overflødig gel med en ren finger, papirserviett eller myk tannbørste. Skyll forsiktig med vann, men ikke svelg.
4. Etter bleking børstes tennene og skinnen med en myk tannbørste og kaldt vann. Blegningen må ikke svelges. Oppbevar rengjort skinne til neste tannbleking.
5. Fortsett med bleking inntil ønsket resultat er oppnådd.
6. Forbigående øket følsomhet i tennene kan forekomme. Kontakt din tannlege for mere informasjon.

ANBEFALT ANVENDELSE

Orbis WHITE Hjemmebleking 16% karbamidperoksid gel
Natbleking: ca. 7–8 timer hver natt i 3–8 dager, avhengig av resultatet.
Dagbleking : 2–4 timer i 3–8 dager, avhengig av resultatet.
Virkningen av 16% karbamidperoksid gel avtar etter ca 4–5 timer.

Orbis WHITE Hjemmebleking, 6% hydrogenperoksid gel
Dagbleking: 30–60 min i 5–10 dager, avhengig av resultatet.

Kan ikke anvendes til personer under 18 år. Kan kun selges til tannleger. For hver bruksperiode kan produktene første gang kun anvendes av tannleger eller under tannlegens direkte oppsyn, hvis det garanteres et tilsvarende sikkerhetsnivå. Deretter stilles produktet til rådighet for forbrukeren i resten av bruksperioden.